

4. Para poner el soporte humeral del hombro, saque los tornillos del manguito humeral (en el soporte del miembro superior). Fije el componente humeral con los mismos tornillos.



5. Al el soporte con el componente humeral del hombro (opcional), afiance primero la sección humeral. Seguidamente aplique y apriete la banda humeral superior (axilar) a través del pecho.

6. El componente humeral del hombro puede adaptarse por separado para lesiones estables de la sección proximal/media humeral. Para ponerlo, saque los tornillos, afloje todas las bandas y separe ambas mitades. Aplique las cubiertas al húmero (parte superior del brazo) y apriete las bandas hasta lograr la tensión deseada. Coloque la banda superior (axilar) alrededor del pecho y apriétela hasta lograr la tensión deseada.



Indicaciones

- Manejo clínico de fractura estable de húmero y antebrazo
- Aplicación postquirúrgica
- Dislocación de codo
- Inmovilización y posicionamiento de la parte superior del brazo, codo, antebrazo y muñeca

ADVERTENCIAS

En caso de sufrir dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier reacción fuera de lo común mientras utiliza este producto, llame al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al **800.452.7993**, o consulte a un médico.

Para uso en un solo paciente.

AVISO: Si bien se ha hecho todo el esfuerzo posible utilizando las técnicas más avanzadas para obtener la máxima compatibilidad entre la funcionalidad, la resistencia, la durabilidad y la comodidad, este dispositivo es sólo una parte del programa general de tratamiento administrado por un profesional médico. No se garantiza que se evitarán lesiones por el uso de este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Los reglamentos federales, estatales y/o locales pertinentes podrían imponer que este dispositivo sea vendido o recetado exclusivamente por especialistas con licencia otorgada por el estado donde ejercen su profesión.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a partir de la fecha de compra original contra defectos en cuanto a material y mano de obra. El desgaste y deterioro normales que se producen durante el uso de un producto no están considerados como defectos. Comuníquese con VQ OrthoCare al **800.266.6969** para averiguar detalles específicos sobre la garantía del producto.



18011 Mitchell South, Irvine, CA 92614

800.266.6969

www.vqorthocare.com

customerservice@vqorthocare.com

Modo de empleo

Soporte de brazo funcional



Instrucciones de aplicación para el paciente

Soporte de brazo funcional

NOTA: En estas instrucciones se supone que un profesional ortopédico ha llevado a cabo la adaptación inicial de este soporte a la medida del brazo, y que las longitudes de las bandas se han ajustado según la necesidad. En caso de que esto no sea así, comuníquese con su proveedor de ortosis.

1. Abra los cierres por contacto para llegar a los componentes suaves. Doble la banda sobre sí misma.



2. Coloque el brazo en el soporte y asegure la envoltura del antebrazo. Fije la banda elástica del antebrazo a la tensión deseada. Haga pasar el resto de la banda del antebrazo por encima y a través de la hebilla. Repita los pasos para la envoltura humeral (parte superior del brazo).



3. Desenganche la banda del cabestrillo y ajústela hasta lograr la longitud óptima. Pase la banda del cabestrillo por encima del hombro no lesionado. Sujételo al anillo que está en el puño.



4. Si utiliza cubiertas de fractura anterior, colóquelas sobre los componentes suaves y asegúrelas con bandas de antebrazo más largas.



5. Fije y ajuste el cabestrillo axilar (pecho).



Cuidado y mantenimiento

Los revestimientos deben sacarse y lavarse a mano según sea necesario, con agua fría y detergente suave; enjuáguelos bien y séquelos al aire (no los ponga en la secadora). Lubrique la bisagra rociándola con silicona al seco, según sea necesario.

Instrucciones de aplicación para el proveedor


Soporte de brazo funcional

1. Para ajustar la longitud de las cubiertas del brazo superior e inferior, afloje los tornillos de ambos lados.




1. (continúa) Coloque la bisagra en la articulación del codo. Ajuste la cubierta del antebrazo hasta que pueda agarrar el puño de manera cómoda. Apriete los tornillos de ambos lados.

2. Ajuste la bisagra de amplitud de movimiento exterior al ajuste deseado. Cada orificio representa un incremento de 30°. Ajuste la bisagra de amplitud de movimiento interior para que tenga un ajuste equivalente al de la bisagra exterior.

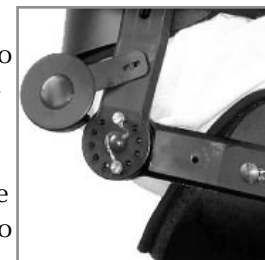

NOTA: Las clavijas anteriores limitan la flexión. Las clavijas posteriores limitan la extensión.

3. Hay tres posiciones de puño para el modelo de pronación/supinación: neutra (A), pronación (B) y supinación (C). Cada posición permite hacer ajustes para posición neutra D), flexión (E) o extensión (F). Para fijar el puño en la posición de antebrazo deseada, saque los tornillos, coloque el puño en la posición deseada y atornille nuevamente.

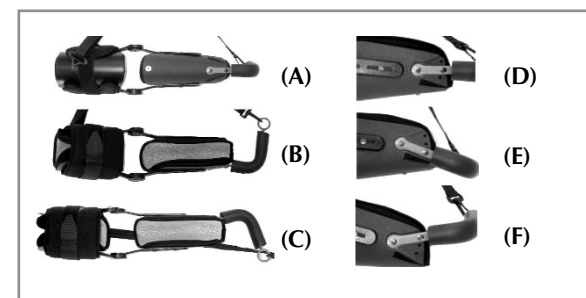

Vista superior

Vista lateral

NOTA: Se muestran las posiciones de la mano DERECHA